

jędrniejsza twarz i szyja,
uniesione policzki,
zredukowane zmarszczki i



podwójny podbródek, wyeliminowane worki pod oczami.

TUA VISO to elektroniczne urządzenie do gimnastyki twarzy.

Ćwiczenia mięśni twarzy, które są bezpośrednio związane ze skórą stają się bardziej; stonowane, rysy twarzy podniesione, zmarszczki wygładzone. Bardzo zaawansowany zminiaturyzowany układ elektroniczny generuje ciąg sinusoidalnych impulsów, które są specjalnie przetranszowane dla delikatnych mięśni twarzy.

Dzięki ich

szczególnej formie i częstotliwości, fale te wywołują precyzyjne ćwiczenia mięśni bez odczuwania nieprzyjemnego bólu, nawet przy wysokim natężeniu impulsów oraz przy bardzo widocznych skurczach.

Impulsy te przekazywane są do skóry przez dwie opatentowane półkoliste elektrody - sprężynowe gąbki: elektrody te nawilżane są za pomocą wody z kranu, wystarczy uzupełnić zbiorniczek urządzenia wodą do wykonania pełnej sesji terapeutycznej. TUA VISO jest łatwy w użyciu.

Po wleńiu wody do zbiorniczka wystarczy włączyć urządzenie i umieścić go na powierzchni twarzy, która ma zostać leczona.

Regulator natężenia impulsów pozwala na precyzyjną regulację natężenia.

TUA VISO jest praktyczny. Jego kształt umożliwia łatwe

TUA VISO w całości zaprojektowane i wyprodukowane we Włoszech



trzymanie w dłoni i utrzymanie regulatora pod ciągłą kontrolą, umożliwiając bezpośrednie umieszczenie elektrod w dowolnej części twarzy. Podświetlany cyfrowy zegar umożliwia ustawienie czasu leczenia, pokazuje pozostały czas, sygnalizuje koniec leczenia i wyłącza urządzenie potwierdzając to sygnałem dźwiękowym. Zbiorniczek wody każdej elektrody, jest wodoszczelny i wystarczający do wykonania całej sesji oraz utrzymanie elektrod w wilgoci.; aby zmoczyć elektrody wystarczy je tylko nacisnąć.

TUA VISO jest bezpieczny. Aparat zasilany jest baterią alkaliczną 9V, dołączoną do zestawu; której rozładowanie sygnalizowane jest żółtą diodą LED.

TUA VISO można zabrać ze sobą wszędzie

Jego kompaktowe wymiary, waga, zasilanie baterijne i podświetlony panel umożliwiają łatwe korzystanie w dowolnym miejscu i o każdej porze, nawet w ciemności!

TUA VISO dostarczany jest w stylowym opakowaniu z zapasowymi gąbeczkami / elektrodami i instrukcją obsługi. Do zestawu dołączone jest także instruktażowe DVD pokazujące możliwości zastosowania i ułatwienia właściwego korzystania z urządzenia.

TUA VISO ZAWIERA:
• TUA VISO,
URZĄDZENIE
DO GIMNASTYKI TWARZY
• 9 V BATERIĘ
ALKALICZNA
• BUTELEczKA
• ZAPASOWE GĄBKI
• INSTRUKCJA OBSŁUGI
• KSIĄŻECZKA APLIKACJI
• OPAKOWANIE
• 12 M-CY GWARANCJA
INSTRUKTAŻOWE
DVD



TUA VISO JEST BEZPIECZNY. ZOSTAŁ ZAPROJEKTOWANY I ZBUDOWANY Z NAJWYŻSZĄ DBAŁOŚCIĄ O JAKOŚĆ I BEZPIECZEŃSTWO ZGODNE Z NAJSUROWSZYMI MIĘDZYNARODOWYMI STANDARDAMI

BEAUTYFANATIC
elektrostymulatory VUPIESSE

Beautyfanatic: Hołubcowa 49, 02-821 Warszawa

Tel: 501 377 241 Fax: 22816 5005 sklep@beautyfanatic. com. pl, www. beautyfanatic. com. pl

The Gymnastics of Smiling

Tua
VISO

THE ELECTRONIC UNIT FOR
FACIAL GYMNASTICS

UTRZYMANIE
LUB PRZYWRÓCENIE
MŁODEGO WYGLĄDU

Przywrócenie lub utrzymanie młodzieńczego wyglądu twarzy,



Podczas życia, nasza twarz ulega widocznym zmianom: pojawiają się zmarszczki i stają się bardziej wyraźne, owalna twarz zmienia swoje linie, skóra traci swoją elastyczność i staje się zbędna, powodując worki pod oczami, policzki stają się obwisłe a szyja zwiotczała.

Kosmetyki mogą skutecznie nawilżyć i wygładzać skórę, ale jest to tylko powierzchowne działanie; aby wykonać lifting twarzy, działania muszą zostać wykonane na części konstrukcyjnej, innymi słowy na mięśniach. Istnieje około trzydziestu mięśni twarzy, niektóre bardzo powierzchowne i delikatne, inne głębsze i dość duże; oprócz mięśni szkieletowych, głowy i szyi, mięśnie te nazywane są skórnymi, ponieważ co najmniej jeden z ich końców jest bezpośrednio zakotwiczony w skórze i oddziałuje na nią. Ponadto większość z nich jest również niezbędna dla wyrażania uczuć, dlatego nazywamy je mięśniami mimetycznymi. **Skóra twarzy** leży i jest zakotwiczona do **strukturalnego "dywanu" składającego się z licznych mięśni:** zmniejszenie ich napięcia i zwartości jest główną przyczyną luźnej skóry. Zdolność utrzymania odpowiedniej objętości i odżywienia, szczególnie na poziomie mniej używanych włókien **oznacza przywrócenie młodzieńczego wyglądu twarzy.**


Powszechnie wiadomo, że odpowiednie ćwiczenia "gimnastyka twarzy" wykorzystywana przez wielu aktorów, na przykład, ćwiczenie mało używanych aktywnych powięzi mięśniowych i rozwijanie innych, zapobiega spadkowi linii podbródka i tworzeniu się worków lub zmarszczek i utrzymaniu młodego wyglądu.

Muskularne ćwiczenia twarzy są jednak często skomplikowane i wymagają ćwiczeń. Dzięki motorycznemu i pobudzającemu efektowi, stymulacja elektryczna może z drugiej strony zwiększyć napięcie mięśniowe w nieszkodliwy, selektywny i szybki sposób, i wiele skuteczniej, niż ćwiczenia fizyczne lub masaż: efekt ten daje widoczne zmniejszenie na przerostową i włókna mięśniowe zwiększające swoją objętość.

Przebieg mikroprądów przez skórę ma także działanie troficzne: lokalna poprawa krążenia, dotlenienie, odżywienie i detoksykacja tkanek poprawia; metabolizmu, zwiększenie formowania elastycznych włókien i stymulowanie podstawowych substancji.


TUA VISO zostało zaprojektowane z myślą o tych wymaganiach. Jego prąd odpowiednio modulowany sinusoidalny jest w stanie indukować bezbolesne, trwale skurcze mięśni. Jego kształt został specjalnie zaprojektowany do stymulacji delikatnych mięśni twarzy i szyi. Możliwość precyzyjnej liniowej regulacji intensywności bodźca i programowanie elektronicznego czasu leczenia umożliwi szybkie i selektywne wyniki.

- 1) Platysma; ściągają dolną szczękę lekko w dół i ciągnie w dół dolną wargę, aż do odsłonięcia zębów. Zapobiega również przygniataniu powierzchni żył szyjnych.
- 2) Quadratus labii inferioris: ciągnie w dół i odwija dolną wargę. Zgrubienie krawędzi jest dodatkowo wspomagane przez wnikliwe działanie mięśni, umieszczony poniżej łukowego.
- 3) Zygomatic ciągnie w dół połączenie warg górę i na zewnątrz, jak podczas uśmiechu.
- 4) Quadratus labii superioris: unosi górną wargę i część ala nosa.
- 5) Caninus: poniżej łukowego, podnosi skórę w kątach ust.
- 6) Buccinator: muskularna podstawa policzka. Ściąga łączenie warg wchodzących i podczas żucia ścisną policzki i usta przed lukiem zębowym.
- 7) Orbicularis oris: zamyka usta, napina linię, którą powstała na skrzyżowaniu ust i zmarszczek warg.
- 8) Mentalis: podnosi i zmarszczki na brodzie, podnosi dolną wargę i wygina w dół.
- 9) Orbicularis oculi: zamyka powieki.
- 10) Frontalis: podnosi brwi i otwiera szeroko oczy.
- 11) Masseter mięsień szkieletowy, które podnoszą dolną szczękę, jak podczas żucia.
- 12) Sternocleidomastoid: inny mięsień szkieletowy, która wygina głowę, odchylając ją w bok, przekręcając powierzchnię na przeciwną stronę.

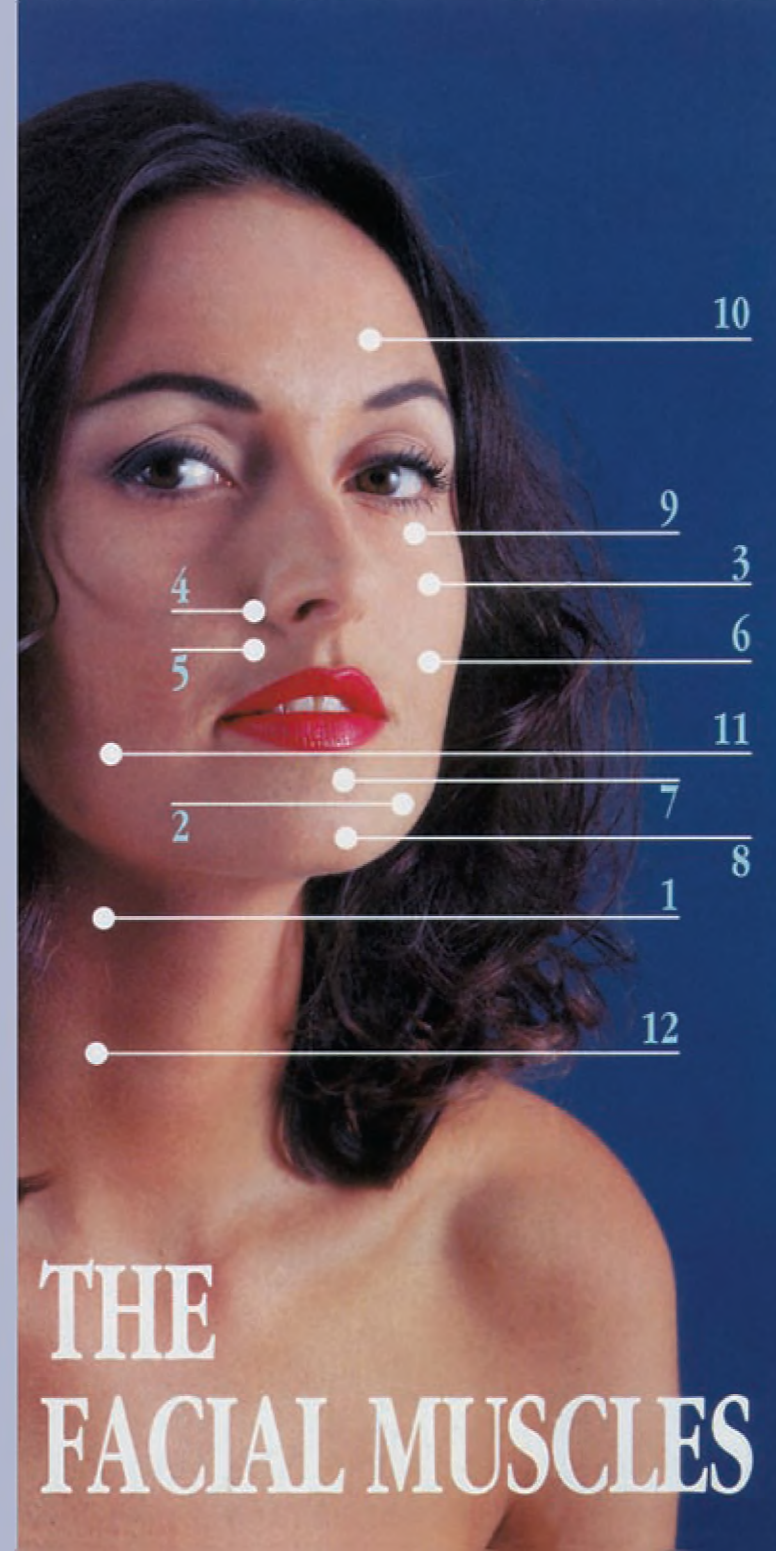

TUA VISO jest łatwy w użyciu: wystarczy umieścić urządzenie na leczonej części twarzy i wyregulować intensywność, aż do uzyskania głębokiego i przyjemnego skurczu mięśni. To wystarczy, aby pobudzić każdy obszar w zaledwie jedną minutę dziennie, ale zwykle czas stosowania to 2-4 minut dla każdej z części. Pojedyncza sesja przeprowadzona na połowie twarzy umożliwia różnicę ciśnienia osmotycznego w porównaniu z nieleczoną stroną należy, zatem zauważyć że, zaledwie po 8-10 sesjach uzyskuje się znaczną poprawę, (łatwą do obliczenia naukowo przy wykorzystaniu ultrasonografii i komputerowej analizy obrazu).

The V.P. Box system

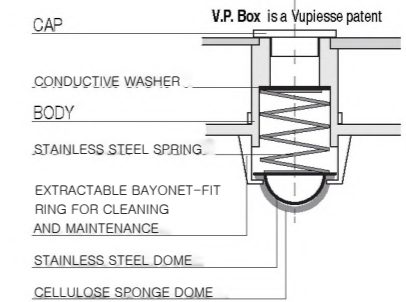

Zaawansowany system ułatwiający szybkie użycie Tua VISO.

Elektrody to elementy o zasadniczym znaczeniu, ponieważ za ich pomocą, impulsy docierają do skóry. TUA VISO ma specjalne opatentowane elektrody VP BOX. Te oryginalne sprężynowe kopuły pokryte miękką gąbką umożliwiają praktyczne umiejscowienie na każdej powierzchni twarzy i delikatnym kontakcie ze skórą; co więcej, ich działanie z wodą umożliwia natychmiastowe użytkowanie, ponieważ nie ma potrzeby stosowania specjalnych żeli przewodzących. Elektrody VP BOX są samonawilżające, a także mają własny zbiorniczek zawierający wystarczającą ilość wody koniecznej do wykonania pełnego zabiegu; zapobiega to ciągłemu nawilżaniu gąbek; aby je zwilżyć, wystarczy nacisnąć. Specjalne mocowania pierścieni umożliwiają ich szybką wymianę i łatwe czyszczenie zbiorniczka.



Podnosi brwi i 3/4 czoła.

Podnosi brwi i górną powiekę.

Ćwiczenie to ma efekt liftingu policzka.

To ćwiczenie "wyciska" i opróżnia worki pod oczami.

Tonizuje część tak jak kiedy się lekko uśmiechasz.

Zwiększa objętość warg i przeciwdziała pojawianiu się zmarszczek pionowych typowych do wieku.

Sprawia, że usta stają się jędrne i przeciwdziałają ich zanikowi..

Modele owalne, zmniejszenie rozciągania spowodowanego spadkiem pod BICHAT.

Sprawia że tkanka szyi staje się jędrniejsza i delikatniejsza.